


E-FLEX REC


Plata / Dorado / Azul



• Protocolo de uso

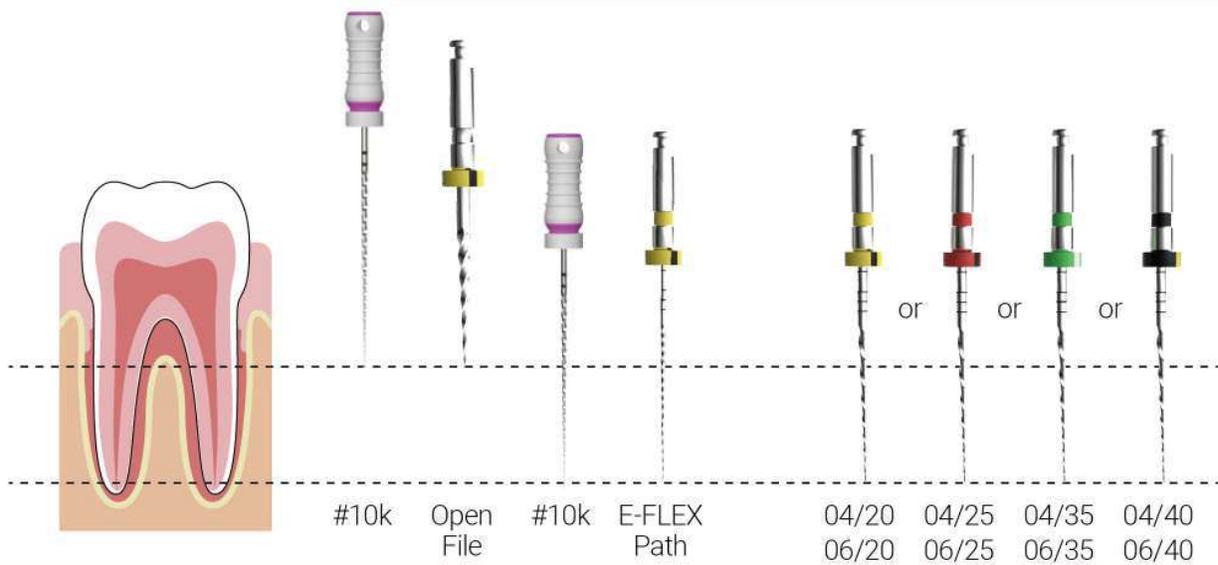

Sistema reciprocante de una sola lima con eficiencia increíble: E-FLEX REC Plata/Dorado/Azul

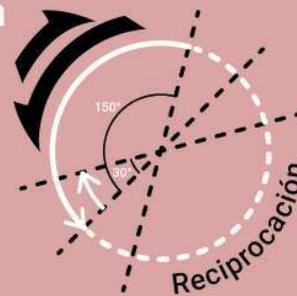

Marca precisa de longitud



Paso de rosca variable

Aumentar gradualmente desde la punta hasta el mango para evitar succión y bloqueo



Ni-Ti con efecto térmico de memoria

Mejora la flexibilidad y la resistencia a la fatiga cíclica para garantizar tratamientos seguros

Tapón



Punta segura sin corte

Reduce formación de escalón y extrucción apical, y minimiza la desviación del conducto



Filo de corte agudo

Mejora la eficiencia de corte



Sección transversal de doble S

Eliminación eficiente de residuos



Indicador de Conicidad



Color de Estándar ISO
Indicar tamaño de punta

	Color	Tamaño de Punta	Conicidad (%)	Indicador de Conicidad	Sección transversal	Longitud (mm)	Velocidad/ Par Sugerido
E-FLEX REC		20	4			21/25/31	FWD: 30° REV: 150°
		25	4				
		35	4				
		40	4				
		20	6				
		25	6				
		35	6				
		40	6				